


ARU[®]

Kork und Versteifungsmaterial
Cork and reinforcement material

8

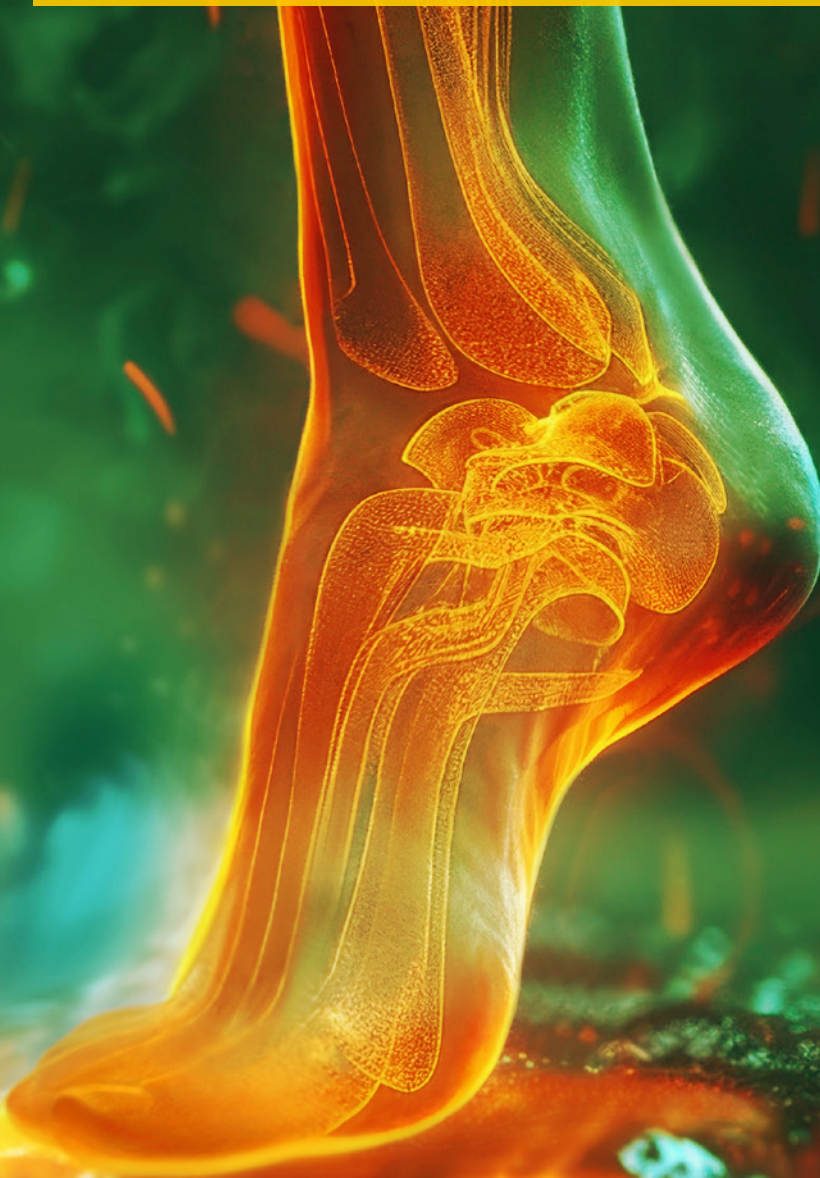

ruckgaber
brüggemann

orthopädie
service

Wir  helfen

Inhalt | Content

ARU® Kork

ARU® Cork

4-8

ARU®-Superflex-Kork ARU®-Superflex cork	4
ARU®-Orthoflex-Kork ARU®-Orthoflex cork	4
ARU®-Elastic-Kork ARU®-Elastic cork	4
ARU®fant ARU®fant	4
ARU®fant Color ARU®fant colour	5
ARU®fant weich ARU®fant soft	5
ARU®fant Soft ARU®fant Soft	5
ARU®fant Supersoft ARU®fant Supersoft	5
ARU®fant 70 Cell ARU®fant 70 Cell	5
ARU® Edel-Microkork ARU® Edel-Microcork	6
ARU® Microkork SK ARU® Microcork SK	6
ARU® Leistenkork Typ VII ARU® Last cork Type VII	6
ARU® Gummikork N 6500 ARU® Rubber cork N 6500	6
ARU® Flexokork ARU® Flexo cork	6
ARU® Superleicht kork ARU® Superlight cork	7
ARU® thermo Gummikork ARU® thermo rubber cork	7
ARU® Naturkork ARU® Natural cork	7
ARU® Korkholz ARU® Wooden cork	7
ARU®fant Supinations- / Pronationskeilstreifen, beige ARU®fant Supination / pronation wedge strips, beige	8
ARU® Microkork Keilstreifen ARU® Microcork wegde strip	8
ARU®fant Soft Supinations- / Pronationskeilstreifen ARU®fant Soft Supination / pronation wedge strips	8

ARU® Versteifungs- und Vorderkappenmaterial

ARU® Reinforcing material | heel counter material

9-14

ARU® Divinycell H 80 ARU® Divinycell H 80	9
ARU®therm ARU®therm	9
ARU®stab ARU®stab	9
ARU®flex ARU®flex	9
ARU®flex Carbonoptik ARU®flex carbon loo	10
ARU®len ARU®len	10
ARU®lux ARU®lux	10
ARU®Realux ARU®Realux	10
Stabex Stabex	11
Thermo HK 1002 EV Thermo HK 1002 EV	11
Agoflex IK 53 / 63 / IK 93 / 103 Agoflex IK 53 / 63 / IK 93 / 103	11
Tenoflex V75 Tenoflex V75	11
Carbon Versteifungssohlen Carbon reinforcing soles	12
Agoflex-Vorderkappen Agoflex toe caps	13
Tepp-Vorderkappen Tepp toe caps	13
Carbon-Thermoplast Metcore CTS Carbon Thermoplast etcore CTS	13
Glasfaser-Laminat Glass fibre laminate	13
Schein clever Schein clever	14
Scheintherm Scheintherm	14

ARU® Gewebematerial

ARU® Fabric material

15

ARU®-Kohlefasergewebe ARU® carbon fibre fabric	15
ARU®-Aramid-Fasergewebe ARU® aramide fibre fabric	15
ARU®-Carbonband, unidirektional ARU® carbon band, unidirectional	15
ARU®-Carbon-Kohlefaserband ARU® carbon fibre band	15
ARU®-Glasband ARU® glass band	15

ARU® Gießharze

ARU® Casting resin

16-18

Degaplast Siegelharz Degaplast sealing resin	16
Härterpulver Hardener powder	16
BKF Laminierharz 80:20 BKF lamination resin 80:20	16
BKF Gießmasse N BKF Cast mixture N	16
Härterpulver 50 curing agent powder 50	17
Härterpaste rot curing paste red	17
Araldit OP Araldite OP	17
Härter Hardener	17
Araldit Gießharz CY 221 Araldit casting resin CY 221	18
ARU®fix ARU®fix	18
Körasolv PU-Lösemittel Körasolv PU solvent	18

ARU® Kappenstoffe, Tauchmittel, Brandsohlenmaterial

ARU® Caps materials, impregnation, insoles

19-20

HP 30, HP 40, HP 50 HP 30, HP 40, HP 50	19
Brandsohlen-Material BM 20/22/25 Insole material BM 20/22/25	19
ARU®-Brandsohlen ORTHO ARU®ORTHO insoles	19
ARU®-Brandsohlen ORTHO mit PP ARU®ORTHO insoles with PP	19
ARU®-Brandsohlen ORTHO Combi ARU®ORTHO Combi insoles	19
BB-Ledex BB-Ledex	20
Brandsohlenmaterial Lefa Insole material Lefa	20
Texon Brandsohlenmaterial Texon insole material	20
Texon Brandsohlenmaterial Texon insole material	20

ARU® Thermoplaste

ARU® Thermoplastics

21

Erkoflex ErkoFlex	21
Erkolen Erkolen	21
Supralen RCH 1000 Supralen RCH 1000	21
Resur Resur	21

Minke/Beil Materialien

Minke/Beil materials



22-23

RX-Thermit RX-Thermit	22
RX-Thermit „Orca“ RX-Thermit „Orca“	22
RX-Thermit „Pontus“ RX-Thermit „Pontus“	22
Minke M.A.X. Minke M.A.X.	22
Tepp 2 Tepp 2	23
Crocith Crocith	23
Crocith 311 Crocith 311	23
Acryl 80:20 Acryl 80:20	23

ARU®-Superflex-Kork | ARU®-Superflex cork



Presskork mit PU-Bindung, sehr leicht, flexibel, in beide Richtungen gut schleifbar, etwas gröbere Oberflächenstruktur, Dichte: ca. 0,20 - 0,22 g/cm³ für Bettungs- und Einlagenbau
pressed cork with PU bond, very light, flexible, easily ground in both directions, slightly coarse texture, density: approx. 0.20 - 0.22 g/cm³ for beddings and foot orthotics

Artikel-Nr. Article no.	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size ca. mm / approx. mm
10500702	2,0	1.000 x 500
10500703	3,0	1.000 x 500
10500704	4,0	1.000 x 500
10500705	5,0	1.000 x 500
10500706	6,0	1.000 x 500

Artikel-Nr. Article no.	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size ca. mm / approx. mm
10500708	8,0	1.000 x 500
10500710	10,0	1.000 x 500
10500720	20,0	1.000 x 500
10500730	30,0	1.000 x 500

ARU®-Orthoflex-Kork | ARU®-Orthoflex cork



Presskork mit PU-Bindung, sehr flexibel, sehr gut schleifbar, etwas feinere Oberflächenstruktur, Anwendung im Bettungs- und Einlagenbau
pressed cork with PU bond, very flexible, very easily ground, slightly finer texture, for beddings and foot orthotics

Artikel-Nr. Article no.	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size ca. mm / approx. mm
10500402	2,0	900 x 600
10500403	3,0	900 x 600
10500404	4,0	900 x 600
10500405	5,0	900 x 600

Artikel-Nr. Article no.	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size ca. mm / approx. mm
10500406	6,0	900 x 600
10500408	8,0	900 x 600
10500410	10,0	900 x 600

ARU®-Elastic-Kork | ARU®-Elastic cork



Presskork mit PU-Bindung, sehr flexibel, sehr gut schleifbar, etwas mittlere Oberflächenstruktur, Anwendung im Bettungs- und Einlagenbau
pressed cork with PU bond, very flexible, very easily ground, slightly medium texture, for beddings and foot orthotics

Artikel-Nr. Article no.	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size ca. mm / approx. mm
10500672	2,0	1.000 X 500
10500673	3,0	1.000 X 500
10500674	4,0	1.000 X 500
10500675	5,0	1.000 X 500

Artikel-Nr. Article no.	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size ca. mm / approx. mm
10500676	6,0	1.000 X 500
10500678	8,0	1.000 X 500
10500680	10,0	1.000 X 500

ARU®fant | ARU®fant



Microkork, tiefziehfähig, elastisch, leicht, Verformung: ca. 120°C, Härte: ca. 55° Shore A, für Bettungs- und Einlagenbau, Aufbaumaterial für Verkürzungen
microcork, vacuum formable, elastic, light, thermoforming at: approx. 120°C, hardness: approx. 55° Shore A, for beddings and foot orthotics, build-up material for contractions

Artikel-Nr. Article no.	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size ca. mm / approx. mm
10500631	1,5	1.070 x 940
10500602	2,0	940 x 535
10500632	2,0	1.070 x 940
10500603	3,0	940 x 535
10500633	3,0	1.070 x 940
10500604	4,0	940 x 535
10500634	4,0	1.070 x 940
10500605	5,0	940 x 535
10500635	5,0	1.070 x 940
10500606	6,0	940 x 535
10500636	6,0	1.070 x 940
10500657	6,5	940 x 535

Artikel-Nr. Article no.	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size ca. mm / approx. mm
10500608	8,0	940 x 535
10500638	8,0	1.070 x 940
10500610	10,0	940 x 535
10500640	10,0	1.070 x 940
10500612	12,0	940 x 535
10500642	12,0	1.070 x 940
10500615	15,0	940 x 535
10500645	15,0	1.070 x 940
10500620	20,0	940 x 535
10500650	20,0	1.070 x 940
10500655	25,0	1.070 x 940
10500629	30,0	1.070 x 940
10500630	30,0	940 x 535

ARU®fant Color | ARU®fant colour

Microkork, tiefziehfähig, elastisch, leicht, Verformung: ca. 120°C, Härte: ca. 50°/55° Shore A, Farbe: stone für Bettungs- und Einlagenbau
microcork, vacuum formable, elastic, light, thermoforming at: approx. 120°C, hardness: approx. 50°/55° Shore A, colour: stone for beddings and foot orthotics

Artikel-Nr. Article no.	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size
01005602	2,0	900 x 900
01005603	3,0	900 x 900
01005604	4,0	900 x 900
01005605	5,0	900 x 900
01005606	6,0	900 x 900
01005608	8,0	900 x 900

Artikel-Nr. Article no.	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size
01005610	10,0	900 x 900
01005615	15,0	900 x 900
01005620	20,0	900 x 900
01005630	30,0	900 x 900
01005631	30,0	900 x 1.800




ARU®fant weich | ARU®fant soft

Microkork, tiefziehfähig, elastisch, leicht, weich, Verformung: ca. 120°C, Härte: ca. 37° Shore A, für Bettungs- und Einlagenbau, Aufbaumaterial für Verkürzungen
microcork, vacuum formable, elastic, light, soft, thermoforming at: approx. 120°C, hardness: approx. 37° Shore A, for beddings and foot orthotics, build-up material for contractions

Artikel-Nr. Article no.	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size
10500552	2,0	1.120 x 1.070
10500554	4,0	1.120 x 1.070
10500556	6,0	1.120 x 1.070

Artikel-Nr. Article no.	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size
10500558	8,0	1.120 x 1.070
10500560	10,0	1.120 x 1.070
10500582	30,00	1.120 x 1.070

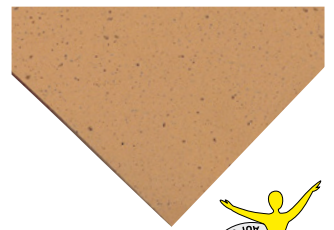

ARU®fant Soft | ARU®fant Soft

Microkork, weiss, tiefziehfähig, elastisch, leicht, softig, Verformung: ca. 120°C, Härte: ca. 45° Shore A, für Bettungs- und Einlagenbau
microcork, white, vacuum formable, elastic, light, soft, thermoforming at: approx. 120°C, hardness: approx. 45° Shore A, for beddings and foot orthotics

Artikel-Nr. Article no.	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size
10500802	2,0	1.080 x 940
10500803	3,0	1.080 x 940
10500804	4,0	1.080 x 940
10500806	6,0	1.080 x 940
10500808	8,0	1.080 x 940
10500810	10,0	1.080 x 940

Artikel-Nr. Article no.	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size
10500812	12,0	1.080 x 940
10500815	15,0	1.080 x 940
10500828	30,0	1.080 x 940
10500829	30,0	1.000 x 830
10500830	30,0	2.100 x 1.050




ARU®fant Supersoft | ARU®fant Supersoft

Microkork, beige, tiefziehfähig, sehr elastisch, leicht, superweich, Verformung: ca. 120°C, Härte: ca. 25° Shore A, für Bettungs- und Einlagenbau
microcork, beige, vacuum formable, very elastic, light, supersoft, thermoforming at: approx. 120°C, hardness: approx. 25° Shore A, for beddings and foot orthotics

Artikel-Nr. Article no.	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size
10500302	2,0	1.050 x 1.050
10500304	4,0	1.050 x 1.050
10500306	6,0	1.050 x 1.050
10500308	8,0	1.050 x 1.050

Artikel-Nr. Article no.	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size
10500310	10,0	1.050 x 1.050
10500330	30,0	1.050 x 1.050
10500340	40,0	1.050 x 1.050

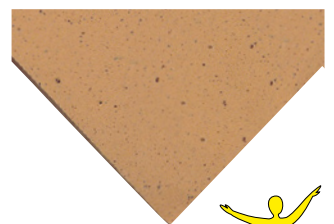


ARU®fant 70 Cell | ARU®fant 70 Cell


Microkork, tiefziehfähig, leicht, sehr fest, Verformung: ca. 120°C, Härte: ca. 70° Shore A, für Bettungs- und Einlagenbau, Aufbaumaterial bei Verkürzungen
microcork, vacuum formable, light, very strong, thermoforming at: approx. 120°C, hardness: approx. 70° Shore A, for beddings and foot orthotics, build-up material for contractions

Artikel-Nr. Article no.	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size
10501302	2,0	910 x 540
10501303	3,0	910 x 540
10501304	4,0	910 x 540
10501305	5,0	910 x 540
10501306	6,0	910 x 540

Artikel-Nr. Article no.	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size
10501346	6,0	1.080 x 910
10501308	8,0	910 x 540
10501348	8,0	1.080 x 910
10501310	10,0	910 x 540
10501330	30,0	1.080 x 910

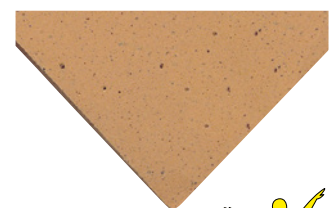

ARU® Edel-Microkork | ARU® Edel-Microcork

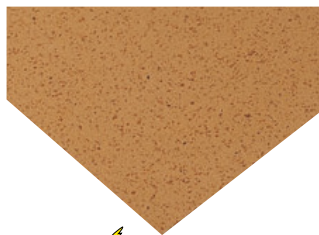

Microkork, tiefziehfähig, elastisch, leicht,
Verformung: ca. 130°C, Härte: ca. 50° - 55° Shore A
microcork, vacuum formable, elastic, light,
thermoforming at: approx. 130°C, hardness: approx. 50° - 55° Shore A

Artikel-Nr. Article no.	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size ca. mm / approx. mm
B1005597	2,0	1.140 x 860
B1005598	3,0	1.140 x 860
B1005599	4,0	1.140 x 860
B1005600	5,0	1.140 x 860

Artikel-Nr. Article no.	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size ca. mm / approx. mm
B1005601	6,0	1.140 x 860
B1005602	8,0	1.140 x 860
B1005603	10,0	1.140 x 860



ARU® Microkork SK | ARU® Microcork SK



Microkork, tiefziehfähig, elastisch, sehr leicht, extrem formstabil,
Verformung: ca. 130°C, Härte: ca. 60° - 70° Shore A, Dichte: ca. 0,26 g/cm³
microcork, vacuum formable, elastic, super light, extremely retains shape,
thermoforming at: approx. 130°C, hardness: approx. 60° - 70° Shore A, density: approx. 0.26 g/cm³

Artikel-Nr. Article no.	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size ca. mm / approx. mm
B1005604	4,0	1.000 x 1.700
B1005605	6,0	1.000 x 1.700
B1005606	8,0	1.000 x 1.700

Artikel-Nr. Article no.	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size ca. mm / approx. mm
B1005607	10,0	1.000 x 1.700
B1005608	15,0	1.000 x 1.700



ARU® Leistenkork Typ VII | ARU® Last cork Type VII



Gummikork, sehr flexibel, Verformung: ca. 120°C, Dichte: ca. 0,48 g/cm³,
Härte: ca. 60° Shore A, für Leistenbau
rubber cork, very flexible, thermoforming at: approx. 120°C, density: approx. 0.48 g/cm³,
hardness: approx. 60° Shore A, for last construction

Artikel-Nr. Article no.	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size ca. mm / approx. mm
10500902	2,0	1.000 x 500
10500903	3,0	1.000 x 500
10500904	4,0	1.000 x 500

Artikel-Nr. Article no.	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size ca. mm / approx. mm
10500905	5,0	1.000 x 500
10500906	6,0	1.000 x 500
10500908	8,0	1.000 x 500



ARU® Gummikork N 6500 | ARU® Rubber cork N 6500



Gummikork, rot, sehr flexibel, Härte: ca. 60° - 70° Shore A,
für Leistenbau
rubber cork, red, very flexible, hardness: approx. 60° - 70° Shore A
for last construction

Artikel-Nr. Article no.	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size ca. mm / approx. mm
B1005613	2,0	1.040 x 630
B1005614	3,0	1.040 x 630
B1005615	4,0	1.040 x 630

Artikel-Nr. Article no.	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size ca. mm / approx. mm
B1005616	5,0	1.040 x 630
B1005617	6,0	1.040 x 630
B1005618	8,0	1.040 x 630



ARU® Flexokork | ARU® Flexo cork



Presskork mit konventioneller Bindung, leicht, besonders elastisch, gut schneid- und schleifbar,
Dichte: ca. 0,30 - 0,40 g/cm³, für Bettungs-, Einlagen- und Leistenbau
pressed cork with conventional bonding, light, particularly elastic, easy to cut and grind,
density: approx. 0.30 - 0.40 g/cm³, for beddings, foot orthotics and last construction

Artikel-Nr. Article no.	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size ca. mm / approx. mm
10500002	2,0	1.010 x 510
10500003	3,0	1.010 x 510
10500004	4,0	1.010 x 510
10500005	5,0	1.010 x 510

Artikel-Nr. Article no.	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size ca. mm / approx. mm
10500006	6,0	1.010 x 510
10500008	8,0	1.010 x 510
10500010	10,0	1.010 x 510



ARU® Superleicht kork | ARU® Superlight cork

Presskork mit hochelastischer Kunstharzbindung, sehr leicht, steifelastisch, in jede Richtung biegefähig, trocknet auch bei längerer Lagerung nicht aus, Dichte: ca. 0,25 - 0,35 g/cm³, für Bettungen, Leistenbau, Aufbaukeile in der Schuhzurichtung
pressed cork with high-elasticity synthetic, resin bonding, light, durable, bends in every direction, does not dry out even after extended storage density: approx. 0.25 - 0.35 g/cm³, for beddings, foot orthotics, built-up wedges in shoe preparation

Artikel-Nr. Article no.	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size
10500102	2,0	1.000 x 500
10500103	3,0	1.000 x 500
10500104	4,0	1.000 x 500
10500105	5,0	1.000 x 500

Artikel-Nr. Article no.	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size
10500106	6,0	1.000 x 500
10500108	8,0	1.000 x 500
10500110	10,0	1.000 x 500



ARU® thermo Gummikork | ARU® thermo rubber cork

Thermoplastischer Gummikork,
Verformung: ca. 120°C, Dichte: ca. 0,52 g/cm³
thermoplastic rubber cork,
thermoforming at: approx. 120°C, density: approx. 0.52 g/cm³

Artikel-Nr. Article no.	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size
10500933	3,0	1.000 x 1.000
B1005632	5,0	1.000 x 1.000
B1005633	10,0	1.000 x 1.000



ARU® Naturkork | ARU® Natural cork

leicht, standfest,
für Absatz- und Sohlenerhöhung
light, durable,
for heel and sole risers

Artikel-Nr. Article no.	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size
10501202	2,0	300 x 120
10501205	5,0	300 x 120
10501210	10,0	300 x 120
10501215	15,0	300 x 120
10501220	20,0	300 x 120



ARU® Korkholz | ARU® Wooden cork

kg
kg

Artikel-Nr. Article no.	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size
10501300		





ARU®fant Supinations- / Pronationskeilstreifen, beige

ARU®fant Supination / pronation wedge strips, beige

Erspart den Vorschleiff, das Ausschneiden aus der Platte entfällt, einfach nur aufkleben und beschleifen, erhebliche Zeit- und Kostenersparnis, Härte ca. 58° Shore A
saves pre-sanding, no need to cut out the sheet, simply glue and sand, considerable time and cost savings, hardness: approx. 58° Shore A

Artikel-Nr. Article no.	Stärke Thickness	Abmessung Size
	ca. mm / approx. mm	
10343006	6,0	940 x 67
10343008	8,0	940 x 67



ARU® Microkork Keilstreifen | ARU® Microcork wegde strip

Microkork, tiefziehfähig, elastisch, sehr leicht, extrem formstabil,
Verformung: ca. 130°C, Härte: ca. 60° - 70° Shore A,, Dichte: ca. 0,26 g/cm³
microcork, vacuum formable, elastic, super light, extremely retains shape,
thermoforming at: approx. 130°C, hardness: approx. 60° - 70° Shore A, density: approx. 0.26 g/cm³

Artikel-Nr. Article no.	Stärke Thickness	Abmessung Size
	ca. mm / approx. mm	
B1005786	10/50	980



ARU®fant Soft Supinations- / Pronationskeilstreifen

ARU®fant Soft Supination / pronation wedge strips

Erspart den Vorschleiff, das Ausschneiden aus der Platte entfällt, einfach nur aufkleben und beschleifen, erhebliche Zeit- und Kostenersparnis, Härte ca. 45° Shore A
saves pre-sanding, no need to cut out the sheet, simply glue and sand, considerable time and cost savings, hardness: approx. 45° Shore A

Artikel-Nr. Article no.	Stärke Thickness	Abmessung Size
	ca. mm / approx. mm	
10500864	4,0	1.080 x 70
10500866	6,0	1.080 x 70



ARU® Divinycell H 80 | ARU® Divinycell H 80

sehr leicht, hohe Festigkeit, hoch lastabsorbierend,
leicht zu verarbeiten, gut isolierend, für Bettungsbau, Absatz- und Sohlenerhöhung usw.
very lightweight, high strength, high weight absorbing,
easy to process, good insulation, for beddings, heel and sole increasing

Artikel-Nr. Article no.	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size ca. mm / approx. mm	Artikel-Nr. Article no.	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size ca. mm / approx. mm
63190100	10	600 x 550	63190400	40	600 x 550
63190200	20	600 x 550	63190500	50	600 x 550
63190300	30	600 x 550	63190700	70	600 x 550



ARU®therm | ARU®therm

thermoplast. verformbares Stabilisierungsmaterial, beidseitig kaschiert, weiss, im Sandwichverfahren
verklebbar, leicht zu schneiden, Verformung: ca. 80°C, für Bettungs- und Einlagenbau, Versteifungen usw.
thermoplastic formable stabilisation material, laminated on both sides, white, sandwich construction
possible, easily cut, thermoforming at: approx. 80°C, for beddings and foot orthotics, inforcements etc.


Artikel-Nr. Article no.	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size ca. mm / approx. mm
31081011	1,1	1.500 x 1.000
31081015	1,5	1.500 x 1.000
31081018	1,8	1.500 x 1.000



ARU®stab | ARU®stab

Material auf Vliesbasis, formbeständig, dunkelgrau, gut schärf- und walkbar, körperfreundlich,
Sandwichbauweise möglich, Verformung: ca. 160°C, für Bettungs- und Einlagenbau, für z.B.
Gelenkversteifungen, Knöchel-, Pero- und Arthrodesenstabilisierung, Vorder-, Hinter- und Knöchelkappen usw.
material on felt basis, retains shape, dark-grey, easily skived and moulded, body-compatible, sandwich
construction possible, thermoforming at: approx. 160°C, for beddings and foot orthotics,
shank reinforcement, ankle-, peroneal- and arthrodesis stabilisation, front, heel and ankle caps etc.

Artikel-Nr. Article no.	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size ca. mm / approx. mm
31086015	1,5	1.500 x 1.000
31086018	1,8	1.500 x 1.000

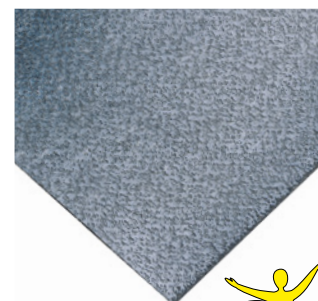

ARU®flex | ARU®flex

Vliesmaterial, hautfarben, perforiert oder glatt, formbeständig, gut schärf- und walkbar, sehr leicht,
Verformung: ca. 160°C, für flexible Stabilisierungen, Vorderkappen, beim Einlagen- und Bettungsbau,
im Bade- und Interimsschuhbereich

*mit Klebebeschichtung


material on felt basis, skin-colour, perforated and smooth, easily skived and moulded, very light,
thermoforming at: approx. 160°C, flexible stabilisation, for toe caps, foot orthotics and footbed construction,
bathroom shoes and temporary shoes

*with adhesive coating

Artikel-Nr. Article no.	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size ca. mm / approx. mm	Artikel-Nr. Article no.	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size ca. mm / approx. mm
perforiert / perforated			glatt / smooth		
31087010	1,2	1.500 x 1.000	31087009	1,2	1.500 x 1.000
31087011*	1,2	1.500 x 1.000	31087019*	1,7	1.500 x 1.000
31087018*	1,7	1.500 x 1.000	31087021*	1,2	1.500 x 1.000
			31087037	1,7	1.500 x 1.000



ARU®flex Carbonoptik | ARU®flex carbon look

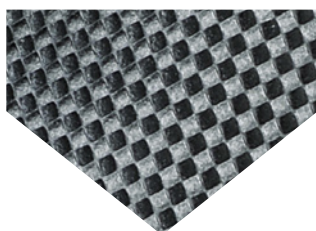

Stabilisierungsmaterial, glatt, schwarz
für Einlagen
stabilisation material, smooth, black,
for insoles

Artikel-Nr. Article no.	Stärke Thickness	Abmessung Size
		ca. mm / approx. mm
31089081	1,2	1.450 x 1.000



ARU®len | ARU®len




Kappenstoff, einseitig beschichtet, braun, formbeständig, nachformbar, konturengenaue Abformung,
Verformung: ca. 140° - 160°C, für Vorderkappen
cap material, coated one side, brown, retains shape, can be reshaped, contour true molding impressions,
thermoforming at: approx. 140° - 160°C, for toe caps

Artikel-Nr. Article no.	Stärke Thickness	Abmessung Size
		ca. mm / approx. mm
31081112	1,2	1.500 x 1.000



ARU®lux | ARU®lux

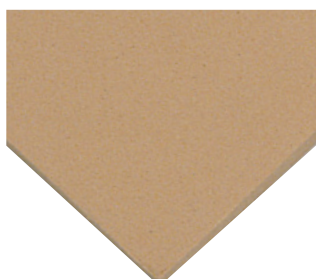


Stabilisierungsmaterial, lederfarben, sehr elastisch, formbeständig und mit einem hohen Dauerbiegeverhalten,
sehr gut stanz-, fräs- und schleifbar, für Einlagen und Fräsröhlänge
stabilisation material, leather colours, very elastic, consistent in form,
easy to punch, to mill and to ground, for insoles and milling blanks

Artikel-Nr. Article no.	Stärke Thickness	Abmessung Size
		ca. mm / approx. mm
10241110	1,0	1.000 x 785
10926015	1,5	1.340 x 840



ARU®Realux | ARU®Realux

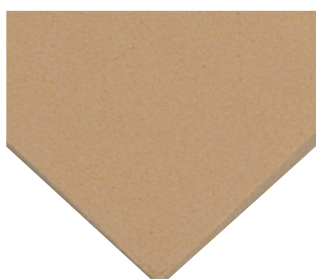

Stabilisierungsmaterial, mittelbeige, sehr elastisch, formbeständig und mit einem hohen Dauerbiegeverhalten,
sehr gut stanz-, fräs- und schleifbar, für Einlagen und Fräsröhlänge
stabilisation material, leather colours, very elastic, consistent in form, easy to punch, to mill and to ground,
for insoles and milling blanks

Artikel-Nr. Article no.	Stärke Thickness	Abmessung Size
		ca. mm / approx. mm
10925011	1,1	1.040 x 400



Stabex | Stabex

leichtes Sohlenversteifungsmaterial mit hoher Federwirkung,
für den Einsatz als Versteifungssohle beim diab. Fußsyndrom und als Amputationsfeder
Achtung! Stabex kann nicht thermoplastisch verformt werden!
reinforcing material with high spring effect, for sole reinforcement of diabetic shoes
Attention: Stabex can **not** be thermoformed!

Artikel-Nr. Article no.	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size
31051007	0,7	520 x 510



Thermo HK 1002 EV | Thermo HK 1002 EV

Versteifungsstoff, mit Vlies, Verformung: ca. 90° - 120°C,
für Einlagen-, Kappen- und Schaftversteifungen
reinforcing material, glue to non-woven material on one side, thermoforming at: approx. 90° - 120 °C,
for foot orthotics, caps and shank reinforcements

Artikel-Nr. Article no.	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size
31095512	1,3	1.400 x 1.000



Agoflex IK 53 / 63 / IK 93 / 103 | Agoflex IK 53 / 63 / IK 93 / 103

Vorderkappenstoff, beidseitig mit Vlies beschichtet, flexibel, standfest, weiss,
Verformung: ca. 160°C, zur Herstellung von Vorderkappen. Art.-Nr. 31090038 perforiert.

***mit Klebebeschichtung**

toe cap material, coated with material on felt basis both sides, flexible, white,
thermoforming at: approx. 160°C, for fabrication of toe caps. Art. no. 31090038 perforated.

***with adhesive coating**

Artikel-Nr. Article no.	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size
IK 53 31090005	0,6	1.350 x 1.000
IK 63 31090016*	0,6	1.400 x 1.000
IK 93 31090035	0,95	1.390 x 1.000

Artikel-Nr. Article no.	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size
IK 93 31090036*	1,0	1.350 x 1.000
IK 93 31090038*	1,0	1.350 x 1.000
IK103 31090039*	1,1	1.350 x 1.000



Tenoflex V75 | Tenoflex V75

Vorderkappenmaterial, fest bis sehr fest, einseitig klebend, Verformung: ca. 130° - 150°C,
zur Herstellung von Arbeits- und Treckingschuhen
toe cap material, solid up to very solid, one side adhesive coating, thermoforming at: approx. 130° - 150°C,
for fabrication of work shoes and trekking shoes

Artikel-Nr. Article no.	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size
B1005792	1,35	1.500 x 1.000



Carbon Versteifungssohlen | Carbon reinforcing soles

flach bzw. vorgeformt, unidirektional, sehr gute Verformbarkeit bei ca. 175°C, hoch bruchsticher,
 Starrsohlen im orthop. Schuhbau
 flat or preshaped, unidirectional, very easy to mould at approx. 175°C, resistant to breakage,
 for rigid soles in orthopaedic shoe construction



flach/flat


Artikel-Nr. Article no.	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size mm
flach/ flat		
34790036	1,6	36
34790037	1,6	37
34790038	1,6	38
34790039	1,6	39
34790040	1,6	40
34790041	1,6	41
34790042	1,6	42
34790043	1,6	43
34790044	1,6	44
34790045	1,6	45
34790046	1,6	46
34790047	1,6	47

Artikel-Nr. Article no.	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size mm
flach/ flat		
34790536	1,9	36
34790537	1,9	37
34790538	1,9	38
34790539	1,9	39
34790540	1,9	40
34790541	1,9	41
34790542	1,9	42
34790543	1,9	43
34790544	1,9	44
34790545	1,9	45
34790546	1,9	46
34790547	1,9	47



vorgeformt/
preshaped

Artikel-Nr. Article no.	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size mm
vorgeformt/ reshaped		
34795036	1,6	36
34795037	1,6	37
34795038	1,6	38
34795039	1,6	39
34795040	1,6	40
34795041	1,6	41
34795042	1,6	42
34795043	1,6	43
34795044	1,6	44
34795045	1,6	45
34795046	1,6	46

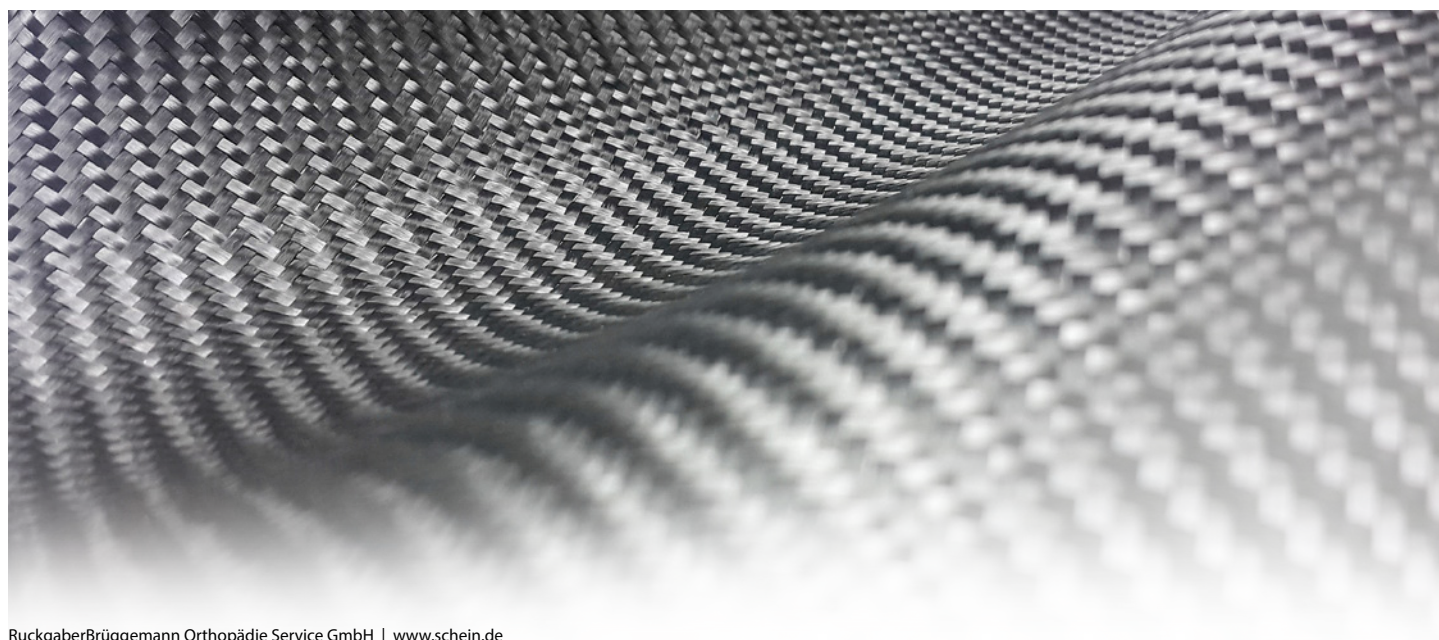

Agoflex-Vorderkappen | Agoflex toe caps

aus Agoflex IK 93, weiss, geschärft, Verformung: ca. 160°C
 Agoflex IK 93, white, edged, thermoforming at: approx. 160°C


	Artikel-Nr. Article no.	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size ca. mm / approx. mm
Messer/blade 22603 gerade/straight	31091044	1,0	VK 44
Messer/blade 23037 gebogen/curved	31091142	1,0	VK 44
Messer/blade 23038 gebogen/curved	31091144	1,0	VK 44
Messer/blade 6913/1	31091200	1,0	
Damen/ladies	B1005783	1,0	
Herren/men	B1005784	1,0	
Herren Übergröße/men oversize	B1005785	1,0	



Tepp-Vorderkappen | Tepp toe caps

aus Tepp II, geschärft, Verformung: ca. 160°C
 Tepp II, skived, thermoforming at: approx. 160°C

	Artikel-Nr. Article no.	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size ca. mm / approx. mm
Messer/blade 14769 gerade/straight	31091542	1,2	VK 42
Messer/blade 22603 gerade/straight	31091544	1,2	VK 44
Messer/blade 23037 gebogen/curved	31091642	1,2	VK 42
Messer/blade 23038 gebogen/curved	31091643	1,2	VK 44
Messer/blade 22603 gerade/straight	31091744	1,7	VK 44
Messer/blade 23038 gebogen/curved	31091745	1,7	VK 44
Herren Übergröße/men oversize	B1005785	1,0	

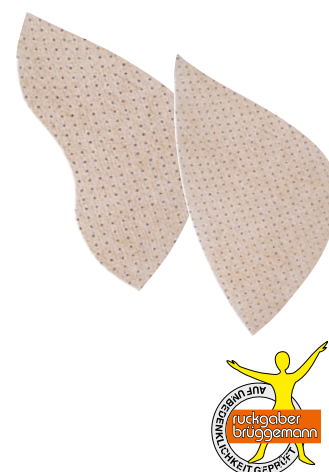

Carbon-Thermoplast Metcore CTS | Carbon Thermoplast etcore CTS

Carbon-Thermoplast, sehr leicht, extrem stabil, sehr gute thermopl. Nachformbarkeit,
 Verformung: ca. 175°C, zur Herstellung von Hallux-Rigidus-Federn, Sohlen-und Gelenkversteifungen,
 Einlagenbau usw.
 carbon thermoplastic, very light, extremely stable, very good thermoformable,
 thermoforming at: approx. 175°C, for fabrication of hallux rigidus pads, sole and shank reinforcements,
 insole fabrication etc.

Artikel-Nr. Article no.	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size
31051120	1,9 undirektional	500 x 625



Glasfaser-Laminat | Glass fibre laminate

Carbon-Thermoplast, sehr leicht, extrem stabil, sehr gute thermopl. Nachformbarkeit, Verformung: ca. 175°C,
 zur Herstellung von Hallux-Rigidus-Federn, Sohlen-und Gelenkversteifungen, Einlagenbau usw.
 carbon thermoplastic, very light, extremely stable, very good thermoformable, thermoforming at: approx.
 175°C, for fabrication of hallux rigidus pads, sole and shank reinforcements, insole fabrication etc.

Artikel-Nr. Article no.	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size
B1005780 Typ 5125	1,5	1.000 x 500





Schein clever Die Revolution im Kappenbau

Der Bau von Hinterkappen stellt immer wieder eine große Herausforderung dar, nimmt er doch ca. 15% der Zeit für die gesamte Maßschuhherstellung in Anspruch. Die vielen Arbeitsschritte sind es, die die Herstellung sehr aufwändig machen. Dank der neu entwickelten Materialkombination „Schein clever“ wird der Bau von Hinterkappen optimiert, verbunden mit einer enormen Zeitersparnis und bietet im Ergebnis einen höchst-möglichen Tragekomfort. Je nach Anforderung an die Hinterkappe können einzelne Regionen mit einem Versteifungsmaterial zusätzlich stabilisiert werden. Ebenso können einzelne Bereiche nur mit einem Polster oder einer Kombination von Polster- und Versteifungsmaterial versehen werden.

Entsprechend dem Versorgungsziel stehen zwei Materialien zur Verfügung: flexibel - für flexible Hinterkappen, fest - für verstärkte Hinterkappen. Durch die spezielle Kombination verschiedener Materialien und deren Eigenschaften bietet Schein clever viele Vorteile, die es einzigartig machen:

- Geringere Materialstärke
- Geringes Gewicht
- Kantenfreie, flexible Ränder
- Passgenaue Anformung mit der Hand, ohne Tiefziehgerät
- Faltenfreie und stabile Form
- Gleichmäßige Wandstärke
- Glatte Oberflächen



Schein clever | Schein clever

	Artikel-Nr. Article no.	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size
fest/firm orange	93100000	2,7	1.055 x 670
flexibel/flexible, grau/grey	93101000	2,5	955 x 720

Schein clever the revolution in heel counter construction

The construction of heel counters is always a particular challenge, taking approximately 15% of the total time for custom-made shoe production. It is the many steps in the process that make the production very time-consuming. Our newly developed Schein clever material combination optimises the construction of the heel counters and offers the greatest possible comfort as a result.

Due to the special combination of different materials and their properties, Schein clever offers many advantages that make it unique:

- Can be cut in any direction
- Easily grindable
- Precise fitting
- Can be thermoplastically moulded

Scheintherm | Scheintherm

Versteifungsmaterial, thermoplastisch verformbar, beidseitig beschichtet
Stiffening material, thermoplastically moulded, coated on both sides

Artikel-Nr. Article no.	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size
10924508	0,9	1.000 x 1.500
10924509	0,9	1.000 x 750
10924511	1,2	1.000 x 1.500
10924512	1,2	1.000 x 750
10924514	1,5	1.000 x 1.500
10924515	1,5	1.000 x 750

ARU®-Kohlefasergewebe | ARU® carbon fibre fabric

Köper, Carbon, schwarz, sehr leicht, hervorragende Dauerfestigkeit, sehr geringe Wärmeausdehnung,
Webart: Köper 2/2, Gewicht 245 g/m²,
für harte Lamine, Gelenkversteifungen, Gelenke, Starrsohlen, Versteifungen usw.
twill, carbon, black, very light, extremely durable, very low heat expansion,
weave type: twill 2/2, weight: 245 g/m²
for hard laminates, shank reinforcements, shanks, rigid soles, reinforcements etc.


Artikel-Nr. Article no.	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size
10503000	0,40	1.000 x 1.000



ARU®-Aramid-Fasergewebe | ARU® aramide fibre fabric

aus Kevlar, gelb, gutes Dämpfungsvermögen, höchste gewichtsbezogene Zugfestigkeit,
Webart: Köper 1/3, Gewicht 170 g/m², für harte Lamine, Formteile usw.
Kevlar, yellow, good dampening properties, maximum weight-related tensile strength,
weave type: twill 1/3, weight: 170 g/m², for hard laminates and moulded components etc.

Artikel-Nr. Article no.	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size
51087064	0,38	1.000 x 1.000

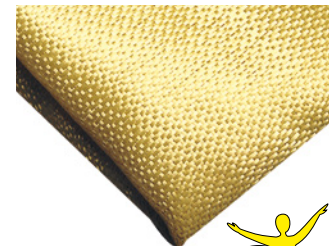

ARU®-Carbonband, unidirektional | ARU® carbon band, unidirectional

Für lokale Verstärkungen in hochfesten und steifen Laminen in Faserlängsrichtungen. Gewicht 172 g/m².
Geeignet für Sohlenversteifung u.v.m.
For local reinforcement in high-strength and stiff laminates along the fiber direction. Weight: 172 g/m².
Suitable for sole stiffening and much more.

Artikel-Nr. Article no.	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size
B1005717	0,25	10 lfm x 30
B1005718	0,25	10 lfm x 40
B1005719	0,25	10 lfm x 50



ARU®-Carbon-Kohlefaserband | ARU® carbon fibre band

schwarz, Ausführung Leinen C 220, hervorragende Dauerfestigkeit bei dynamischer Belastung, Gewicht 200 g/m².
black, linen version C 220, excellent fatigue strength under dynamic loads, Weight 200 g/m².

Artikel-Nr. Article no.	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size
51065105	0,30	B/w=ca./approx. 50 mm



ARU®-Glasband | ARU® glass band

Leinen, weiss, hohe Festig- und Steifigkeit, leicht tränk- und anformbar, Gewicht 600 g/m²
für z.B. Gelenkversteifungen, Gelenke, Starrsohlen, beim Einbau von Gelenkfedern usw.
linen, white, high strength and stiffness, easy to soak and form, weight: 600 g/m²
e.g. for shank reinforcements, shanks, rigid soles, installation of shank cushions etc.

Artikel-Nr. Article no.	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size
51066030	0,5	50 lfm x 30
51066039	0,5	50 lfm x 40
51066050	0,5	50 lfm x 50





Degaplast Siegelharz | Degaplast sealing resin

Acrylharz, 2-komponentig, z.B. im Gießverfahren mit Glasseide-, Glasfaser-, Carbonmatten usw. zur Herstellung von Gelenksohlen, Versteifungen usw., Härterzugabe: 1 - 3%, Verarbeitungszeit je nach Härterzugabe 6 - 10 min., Aushärtezeit je nach Härterzugabe 14 - 20 min.
acrylic resin, 2-components, e.g. casting with glass silk, fibreglass, carbon mats etc., manufacture of shank soles, reinforcements etc., curing agent: 1 - 3%, processing time depending on curing agent 6 - 10 min., curing time depending on curing agent 14 - 20 min.

Artikel-Nr. Article no.	Größe Size
32620009	0,9 kg
32620046	4,6 kg



Härterpulver | Hardener powder

für Degaplast Siegelharz
for Degaplast sealing resin

Artikel-Nr. Article no.	Größe Size
32655550	150 g



BKF Laminierharz 80:20 | BKF lamination resin 80:20

hartes Acryl-Gießharz, transparent, thermoplastisch, hautfreundlich, abmischbar mit allen anderen BKF-Acrylharzen, Aushärtung durch ca. 1 - 3% Härterpaste oder Härterpulver 50
hard acrylic resin, transparent, thermoplastic, skin-friendly, can mixed with all other BKF acrylic resins, curing agent: approx. 1 - 3% curing paste or curing hardener powder 50

Artikel-Nr. Article no.	Größe Size
51014010	0,9 kg
51014046	4,6 kg



BKF Gießmasse N | BKF Cast mixture N

zähflüssige, fein-cremige, teilelastische Polyester-Gießmasse, härtet klebfrei aus, geringe Schrumpfung, nagelbar, gut schleifbar, sehr gute Haftung auf ASTI-OP®, ASTI-L®, ALPA-PLAST® und Holz, zur Herstellung von Positivformen und Modellen (z.B. Leistenbau, Spitzenzugaben, Einlagenmodellen, Ausgießen von Trittschäumen), Aushärtung durch ca. 3% Härterpaste
viscous, fine creamy, partially flexible polyester moulding compound, hardens without stickiness, minimal shrinkage, nailable, easy to sand, good bonding to ASTI-OP®, ASTI-L®, ALPA-PLAST® and wood - Used for the fabrication of positive moulds and models (e. g. lasts, toe sapcer additions, models for insoles, filling of foot prints), curing by means of approx. 3% hardener

Artikel-Nr. Article no.	Größe Size
51042019	2,0 kg
51042020	4,0 kg

Härterpulver 50 | curing agent powder 50

50%ig auf Benzoylperoxid-Basis, zum Aushärten von Polyester- und Acrylharzen.

Nicht für Spachtelmassen geeignet!

50% of benzoyl peroxide basis, for curing of polyester and acrylic resins.

Not to use as filler!

Artikel-Nr. Article no.	Größe Size
51025030	150 g
51025040	500 g



Härterpaste rot | curing paste red

50%ig auf Benzoylperoxid-Basis, zum Aushärten von Polyester- und Acrylharzen und Polyesterspachtelmassen

50% of benzoyl peroxide basis, for curing of polyester and acrylic resins and polyester filler

Artikel-Nr. Article no.	Größe Size
51024005	50 g
51024020	200 g



Härterpaste Kartusche | hardener paste cartridge

Härterpaste 40 g. Kartusche rot, für Dosiergerät
hardener paste red 40 g cartridge for dosing device

Artikel-Nr. Article no.	Größe Size
51024004	40 g



Araldit OP | Araldite OP

Exoxid-Gießharz, sehr hohe Festigkeit, langzeitstabil, nicht thermoplastisch nachformbar, sehr geringe Schrumpfung, kann offen oder auch zwischen PVA-Folienschläuchen verarbeitet werden, z.B. im Gießverfahren mit Glasseide-, Glasfaser-, Carbonmatten usw., zur Herstellung von Gelenksohlen, Versteifungen usw., Härterzugabe: 20%, Verarbeitungszeit bei Härter HY 943 1 Std., bei HY 956 2 Std., Aushärtezeit bei Härter: HY 943 2 Std., bei HY 956 5 Std.

epoxy casting resin, very high strength, long-term stability, cannot be thermoplastic moulded, very low shrinkage, can be processed openly or between PVA foil tubes, e.g. resin casting with glass silk, fibreglass, carbon mats etc., manufacture of shank soles, reinforcements etc., curing agent: 20%, processing time with curing agent HY 943 1 h, with HY 956 2 h, curing time with curing agent HY 943 2 h, with HY 956 5 h.

Artikel-Nr. Article no.	Größe Size
51042010	1,0 kg
51042015	5,0 kg



Härter | Hardener

für Araldit OP, Aushärtezeit: HY 956 5 Std., HY 943 2 Std.

for Araldite OP, curing time: HY 956 5 h, HY 943 2 h

Artikel-Nr. Article no.		Größe Size
51042040	HY 956	200 g
51042050	HY 956	1,0 kg





Araldit Gießharz CY 221 | Araldit casting resin CY 221

elastisches Epoxid-Gießharz, abmischbar mit Araldit-OP, Aushärtung durch HY 956 / 5 Std.-Härter
elastic epoxy casting resin, can be mixed with Araldit-OP, curing with HY 956 / 5 h curing agent

Artikel-Nr. Article no.	Größe Size
51041910	1,0 kg



ARU®fix | ARU®fix

Polyester-Gießharz, 2-komponentig, zur Verarbeitung mit Glasseiden- und Glasfasergewebe, z.B. für Gelenke, Sohlenversteifungen, Verstärkungen usw. Verarbeitungszeit: ca. 30 min. nach Härterzugabe, ohne Härterpaste

polyester casting resin, 2-components, for processing with glass silk and fibreglass fabric, e.g. for shanks, sole stiffeners, reinforcements etc., processing time: approx. 30 min. after adding curing agent, without hardener paste

Artikel-Nr. Article no.	Größe Size
10900070	0,8 kg



Körasolv PU-Lösemittel | Körasolv PU solvent

Organisches Lösemittel, toluolfrei, zum Verdünnen für PU-Klebstoffe, Reiniger und als Tauchmittel von Hinterkappenstoffen, Sohlenlöser für PU-geklebte Sohlen, farblos-transparent

organic solvent, free of toluene, thinner for PU glues, cleaner and impregnation agent for cap materials, sole solvent for PU glue soles, colourless-transparent


Artikel-Nr. Article no.	Größe Size
10627001	1,0 ltr.
10627050	5,0 ltr.
10627052	12,0 ltr.



HP 30, HP 40, HP 50 | HP 30, HP 40, HP 50

Hinterkappenstoff, sehr gut anformbar, gute Verarbeitung,
mit Tauchmittel F 20 aktivierbar, zur Herstellung von Hinterkappen
heel cap material, very easily moulded, easy processing,
activated with impregnation agent F 20, for manufacture of heel cap

Artikel-Nr. Article no.	Stärke Thickness	Abmessung Size
ca. mm / approx. mm		
HP 30	31097030	1,25
HP 40	31097040	1,5
HP 50	31097050	1,8
		1.400 x 1.000

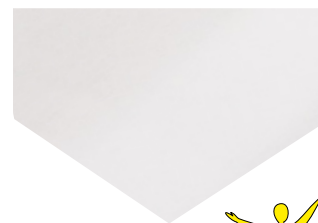

Brandsohlen-Material BM 20/22/25 | Insole material BM 20/22/25

Brand- und Zwischensohlenmaterial, formstabil, gut klebbar, hohe Feuchtigkeitsaufnahme,
ausgezeichnete Fußhygiene, Verformung: ca. 70°C
foot orthotics and intermediate sole material, stable shape, easily glued, high moisture absorption,
excellent foot hygiene, thermoforming at: approx. 70°C

Artikel-Nr. Article no.	Stärke Thickness	Abmessung Size
ca. mm / approx. mm		
BM 20	31093020	2,0
BM 22	31093022	2,2
BM 25	31093025	2,5
		1.400 x 1.000



ARU®-Brandsohlen ORTHO | ARU®ORTHO insoles

aus Texon, mit eingespritztem PP-Keil, thermopl. verformbar, stanz- und schneidbar,
nagel- und klammerbar, bricht nicht, Verformung: ca. 80°C, für Einbau in orthopädische Maßschuhe
Texon, with injected PP wedge, thermoformable, can be punched and cut,
nailed and clamped, does not break thermoforming at: approx. 80°C, used in shoes made to measure

Artikel-Nr. Article no.	Stärke Thickness	Abmessung Size
ca. mm / approx. mm		
10860030	2,0	H 1
10860033	2,2	H 2
10860035	2,5	H 3



ARU®-Brandsohlen ORTHO Combi | ARU®ORTHO Combi insoles

aus Texon, durchgängig eingespritzter PP-Keil als Versteifungssohle bei Diabetikerschuhen,
thermopl. verformbar, stanz- und schneidbar, nagel- und klammerbar, bricht nicht,
Verformung: ca. 80°C, Einbau in orthopädische Maßschuhe
Texon, fully injected PP wedge as reinforcing sole for diabetic shoes, thermoformable,
can be punched and cut, nailed and clamped, does not break,
thermoforming at: approx. 80°C, used in shoes made to measure

Artikel-Nr. Article no.	Stärke Thickness	Abmessung Size
ca. mm / approx. mm		
10860040	3,0	H 5

ARU®-Brandsohlen ORTHO mit schräg verlaufend thermopl. |
ARU®ORTHO insoles

aus Texon, mit schräg verlaufend thermopl. verformbar, stanz- und schneidbar, nagel- und klammerbar,
bricht nicht, Verformung: ca. 80°C, für Einbau in orthopädische Maßschuhe
Texon, with diagonally running thermoformable, can be punched and cut, nailed and clamped,
does not break, thermoforming at: approx. 80°C, used in shoes made to measure

Artikel-Nr. Article no.	Größe Size
10860045	S5






BB-Ledex | BB-Ledex

Brandsohlenmaterial, Rindleder 1-1,5 mm kaschiert mit Texon 1 mm
insole material, cowhide leather 1-1.5 mm laminated mit Texon 1 mm

Artikel-Nr. Article no.	Stärke Thickness	Abmessung Size
		ca. mm / approx. mm
B1005790	2,0	

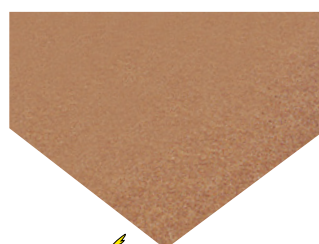

Brandsohlenmaterial Lefa | Insole material Lefa

Brand- und Zwischensohlenmaterial, formstabil
foot orthotics and intermediate sole material, stable shape

Artikel-Nr. Article no.	Stärke Thickness	Abmessung Size
		ca. mm / approx. mm
31096020	2,0	1.500 x 1.000



Texon Brandsohlenmaterial | Texon insole material

natur
nature

Artikel-Nr. Article no.	Stärke Thickness	Abmessung Size
		ca. mm / approx. mm
B1005781	1,5	1.500 x 1.000
B1005782	2,0	1.500 x 1.000



Texon Brandsohlenmaterial | Texon insole material

chrome T 70, formstabil
chrome T 70, stable shape

Artikel-Nr. Article no.	Stärke Thickness	Abmessung Size
		ca. mm / approx. mm
31094030	3,0	1.500 x 1.000



Erkoflex | Erkoflex

gummiartig, transparent, weich, dauerelastisch, reißfest, schleif- und schärfbar, Verformung: ca. 70° - 80°C, zur Herstellung von Knöchel- und Peronäus-Lähmungskappen, für die Innenschuhtechnik, Probeschuh, Schaftmuster
rubber-like, transparent, soft, permanently elastic, can be ground and edged, thermoforming at: approx. 70° - 80°C, manufacture of ankle- and peroneal paralysis caps, for interior shoe technique, test shoes, shaft samples

Artikel-Nr. Article no.		Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size
57580115	transparent	1,5	1.000 x 1.000
57580120	transparent	2,0	1.000 x 1.000
57580130	transparent	3,0	1.000 x 1.000
57580140	transparent	4,0	1.000 x 1.000
57580220	grellrot/bright red	2,0	1.120 x 860
57580530	grellgrün/bright green	3,0	1.120 x 860



Erkolen | Erkolen

PE-Kunststoff, transparent, elastisch, reißfest, tiefziehfähig, Verformung: ca. 120°C, als Versteifungssohle für Eleganteinlagen, Schalenmaterial zum Anschäumen von Leistenschäumen
PE plastic, transparent, elastic, tear-resistant, can be vacuum-formed, thermoforming at: approx. 120°C, reinforcing sole for elegant inlays, shell material for foaming of lasts


Artikel-Nr. Article no.		Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size
57510106	transparent	0,6	1 qm



Supralen RCH 1000 | Supralen RCH 1000

Niederdruck-Polyethylen, tiefziehfähig, treibfähig, sehr hohe Festigkeit, Verformung: ca. 180°C, zur Herstellung von Einlagen, Peronäusorthesen, Gelenkversteifungen, Halux-Rigidus-Federn
low-pressure polyethylene, can be vacuum-formed, can be embossed, very high strength, thermoforming at: approx. 180°C, manufacture of inlays, peroneal orthotics, shank reinforcements, hallux rigidus cushions

Artikel-Nr. Article no.		Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size
31075020	hautfarben/skin colours	2,0	965 x 930
31075030	hautfarben/skin colours	3,0	965 x 930
31075040	hautfarben/skin colours	4,0	965 x 930
31075050	hautfarben/skin colours	5,0	965 x 930
31075060	hautfarben/skin colours	6,0	965 x 930
31073010	schwarz/black	1,0	965 x 930
31074010	rot/red	1,0	965 x 930

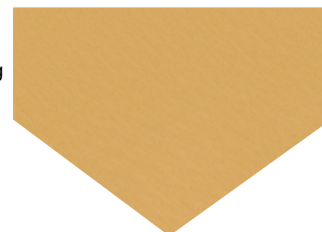

Resur | Resur

Hart-Polyethylen, weiss, tiefziehfähig, Verformung: ca. 140°C, für Korsett- und Orthesenbau
hard polyethylene, white, can be vacuum-formed, thermoforming at: approx. 140°C, for corsets and orthotics

Artikel-Nr. Article no.		Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size
31066002		2,0	1.000 x 1.000
31066004		4,0	1.000 x 1.000
31066005		5,0	1.000 x 1.000
31066101		1,0	2.000 x 1.000
31066102		2,0	2.000 x 1.000
31066104		4,0	2.000 x 1.000
31066105		5,0	2.000 x 1.000
31066106		6,0	2.000 x 1.000





RX-Thermit | RX-Thermit

Material auf Vliesbasis, Verformung: ca. 160°C, sehr gut walkbar, konturengenaue Abformung, Sandwichbauweise möglich, leichtes Beschleifen, kein Verschmieren, sehr gute Widerstandswerte, für Hinter- und Knöchelkappen, Knöchelstabilisierungen, bei Einlagen- und Bettungsbau, Gelenkversteifungen dunkelgrau, einseitig beschichtet, *gelocht
material on felt basis fabric material, thermoforming at: approx. 160°C, very easily fulled, contour true molding impressions, sandwich construction possible, easily ground, no smearing, very good resistance values, for heel and ankle caps, bone stabilisers, inlays and footbeds, shank reinforcements dark grey, coated one side, *perforated

Artikel-Nr. Article no.	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size ca. mm / approx. mm
63207150 *	1,5	1.500 x 1.000
63208150	1,5	1.500 x 1.000
63208180	1,8	1.500 x 1.000



RX-Thermit „Orca“ | RX-Thermit „Orca“

Versteifungsmaterial, dunkelgrau, einseitig beschichtet, Verformung: ca. 130° - 160°C, hohe Festigkeit und Stabilisierungseigenschaften bei hoher Biegefestigkeit und Bruchsicherheit, für Arthrodesen- und Peronäuskappen, Schaleneinlagen, Stützlaschen usw.
reinforcing material on felt basis, dark-grey, coated one side, thermoforming at: approx. 130° - 160°C, high strength and stabilisation properties with high bending resistance and breakage security, for arthrodesis and peroneal caps, shell inlays, support straps etc.

Artikel-Nr. Article no.	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size ca. mm / approx. mm
63206190	1,9	1.500 x 1.000



RX-Thermit „Pontus“ | RX-Thermit „Pontus“

Material auf Vliesbasis, blau, einseitig beschichtet, Verformung: ca. 160°C, hoher Tragekomfort, leichtes Beschleifen, kein Verschmieren, Sandwichbauweise möglich, sehr gut walkbar, sehr hohe Steifigkeit beim Endprodukt, als sehr feste Hinterkappe, im Einlagen- und Bettungsbau, Versteifungs- und Stützelemente in jeder Form
material on felt basis fabric, blue, coated one side, thermoforming at: approx. 160°C, high wearing comfort, easily ground, no smearing, sandwich construction possible, very easily fulled, very high stiffness in final product, very strong heel cap, inlays and footbeds, stiffening and support elements in any shape for arthrodesis and peroneal caps, shell inlays, support straps etc.

Artikel-Nr. Article no.	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size ca. mm / approx. mm
63208220	2,0	1.500 x 1.000



Minke M.A.X. | Minke M.A.X.

Stabilisierungsmaterial, grün, auf zwei Trägermaterialien (Vlies und Gaze), Verformung: ca. 80° - 160°C, kein Verschmieren und Brennen am Schleifband, zähelastisch, Sandwichbauweise möglich, für Vorder- und Perokappenversteifung, Blattversteifungen, für Vorder- und Hinterkappen, usw.
stabilising material, green, on two carrier materials (non-woven fleece and gaze), thermoforming at: approx. 80° - 160°C, no smearing and burning on abrasive belt, slow elasticity, sandwich construction possible, for toecap and peroneal cap stiffening, instep stiffening, for toe caps and heel caps etc.

Artikel-Nr. Article no.	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size ca. mm / approx. mm
63210100	1,1	1.500 x 1.000
63210150	1,5	1.500 x 1.000

Tepp 2 | Tepp 2

Kunststoff-Vliesmaterial, hautfarben, Verformung: ca. 160°C, gelocht, formbeständig, nachformbar, dauerflexibel, abwaschbar, gut schärfbar, sehr gut walkbar, für flexible Stabilisierungen, flexible Vorderkappen, als flexibel versteifendes Element im Bade- und Interimsschuhbereich, ohne Beschichtung, *mit Beschichtung
plastic material on felt basis, skin colours, thermoforming at: approx. 160°C, retains shape, can be reshaped, permanently flexible, washable, can be edged, very easily fulled, for flexible stabilisers, flexible toecaps, flexible stiffening component on bath and temporary shoe area, no coating, *with coating

Artikel-Nr. Article no.		Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size ca. mm / approx. mm
63211200*	glatt / smooth	0,6	1.500 x 1.000
63211210	glatt / smooth	0,6	1.500 x 1.000
63211300	glatt / smooth	1,0	1.500 x 1.000
63211400	gelocht / perforated	1,0	1.500 x 1.000
63211405*	glatt / smooth	1,0	1.500 x 1.000
63211410*	gelocht / perforated	1,0	1.500 x 1.000
63211500	glatt / smooth	1,7	1.500 x 1.000
63211510*	glatt / smooth	1,7	1.500 x 1.000
63211600	gelocht / perforated	1,7	1.500 x 1.000
63211610*	gelocht / perforated	1,7	1.500 x 1.000



Crocith | Crocith

Stabilisierungsmaterial, gelb, einseitig beschichtet, Verformung: ca. 160°C, faltenfreie und butterweiche Verarbeitung, beeindruckende Stabilisierungseigenschaften schon bei einlagiger Versorgung, Sandwichbauweise möglich, hohe Bruchsicherheit, für Vorder- und Hinterkappen, Peronäusversorgung, Arthrodesenkappen, Schaleneinlage

stabilising material, yellow, coated one side, thermoforming at: approx. 160°C, fold-free and butter-soft processing, impressive stabilising properties even with single-layer treatment, sandwich construction possible, high breakage resistance, for toecaps and heel caps, peroneal treatment, arthrodesis caps, shell inlay

Artikel-Nr. Article no.		Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size ca. mm / approx. mm
63215170*	butterweich / butter-soft	1,7	1.500 x 1.000



Crocith 311 | Crocith 311

Stabilisierungsmaterial, hochabriebfest, hellgrau, Verformung: ca. 120°C, atmungsaktiv, sehr flexibel, extrem hart, formstabil, gute Verklebungseigenschaften, schneidbar, fräsbearbeitbar, für die Herstellung von Innenschuhen, für extreme Verkürzungskappen, im Einlagen- und Bettungsbau, als Brandsohlenmaterial, als Stützelemente, hellgrau

stabilising material, high friction resistance, light-grey, thermoforming at: approx. 120°C, active breathing, very flexible, extremely hard, stable shape, good adhesive properties, can be cut and milled, manufacture of inner shoes, extreme shortening caps, inlays and footbeds, foot orthotics material, support elements, light grey

Artikel-Nr. Article no.		Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size ca. mm / approx. mm
63040020	hellgrau / light grey	2,0	1.000 x 750
63040030	hellgrau / light grey	3,0	1.000 x 750



Acryl 80:20 | Acryl 80:20

auf Acryl-Harz-Basis mit mehrfacher Armierungseinlage, hautfarben, Verformung: ca. 140°-165°C, hart, sehr gut klebbar und schleifbar, sehr gut thermo-plastisch verformbar, für Gelenke, Fußheber, Arthrodesenkappen, stützende Einbauteile

acrylic resin base with multiple reinforcing inlay, skin colours, thermoforming at: approx. 140° - 165°C, hard, very easily glued and ground, very easily thermoformable, for shanks, foot lifts, arthrodesis caps, supporting inlay components

Artikel-Nr. Article no.		Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size ca. mm / approx. mm
53099015	hautfarben/skin colours	1,5	0,5 qm
53099020	hautfarben/skin colours	2,0	0,5 qm
53099030	hautfarben/skin colours	3,0	0,5 qm
53099040	hautfarben/skin colours	4,0	0,5 qm
53099050	hautfarben/skin colours	5,0	0,5 qm
53099140	schwarz/black	4,0	0,5 qm



Kork und Versteifungsmaterial
Cork and reinforcement material

ARU®

RuckgaberBrüggemann
Orthopädie Service GmbH
Roseckstraße 35
72108 Rottenburg-Seebronn

Tel.: +49 7457 9497-0
Fax: +49 7457 9497-35
rottenburg@schein.de

www.schein.de

8

An abstract, artistic photograph featuring a dark green, textured background. Scattered throughout are numerous small, elongated, red and orange particles, some of which appear to be glowing or reflecting light, creating a sense of depth and movement. The overall effect is reminiscent of a microscopic view or a close-up of a natural material.